



МИКРОСКОПЫ ОПЕРАЦИОННЫЕ

Область применения: медицина.

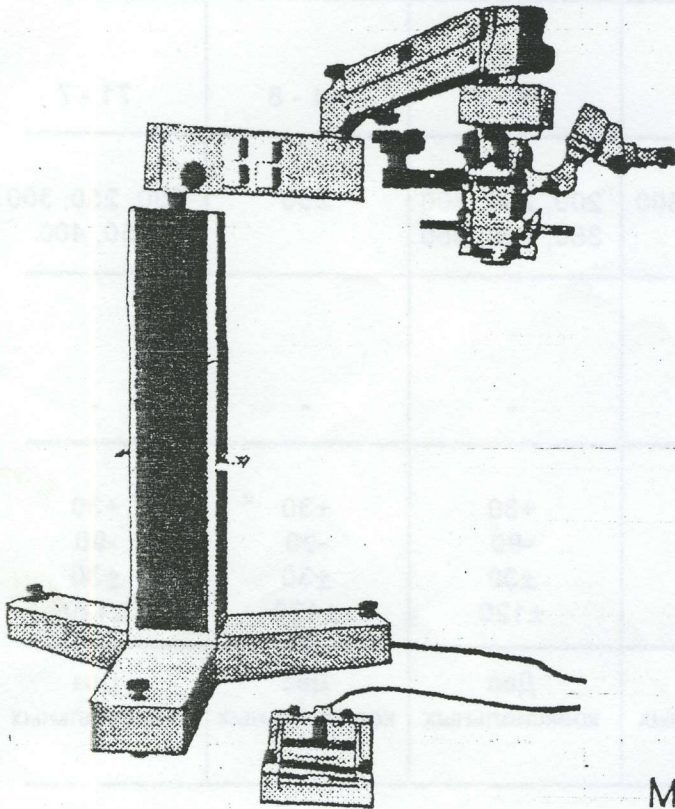


МИКО-ОФ

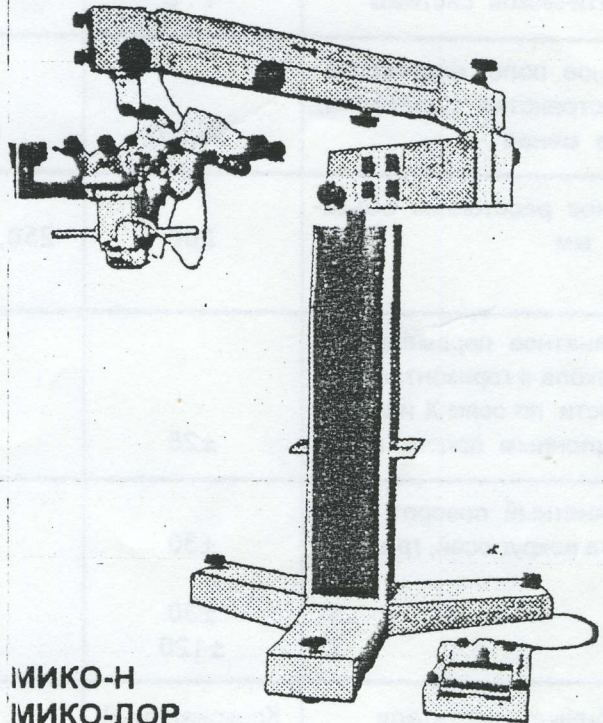

**МИКО-Н
МИКО-ЛОР**

Микроскопы стационарные с напольным штативом **МИКО-ОФ, МИКО-Н, МИКО-ЛОР** и микроскопы с настенным креплением **МИКО-ОФ2, МИКО-Н2, МИКО-ЛОР2**.

Предназначены для проведения микрохирургических операций, исследований и диагностики офтальмологии, нейрохирургии, оториноларингологии на современном техническом уровне.

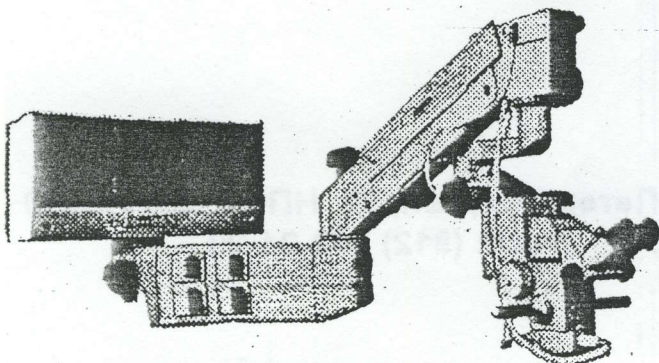

**МИКО-Н2
МИКО-ЛОР2**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатели назначения	МИКО-ОФ	МИКО-Н	МИКО-ЛОР	МИКО-Н2	МИКО-ЛОР2
Увеличение микроскопа с плавным изменением	5 - 25	3,2 - 25	2,2 - 25	4 - 20	2,5 - 25
Коэффициент трансфокации панкратической системы	1 : 5	1 : 5	1 : 5	1 : 5	1 : 5
Линейное поле микроскопа в пространстве предметов, мм, не менее	35 - 7	53 - 9	77 - 7	44 - 8	71 - 7
Фокусное расстояние объективов, мм	200	250, 275, 300	200, 250, 300 350, 400, 450	250	200, 250, 300 350, 400
Координатное перемещение микроскопа в горизонтальной плоскости по осям X и Y над операционным полем, мм	±25	-	-	-	-
Координатный поворот микроскопа вокруг осей, град.: X	±30	+30 -90	+30 -90	+30 -90	+30 -90
Y	±30	±30	±30	±30	±30
Z	±120	±120	±120	±120	±120
Волоконные осветители	Коаксиальный и 2 наклонных боковых	Два коаксиальных	Два коаксиальных	Два коаксиальных	Два коаксиальных

Биноклярные насадки - с переменным углом наклона окуляров от 30 до 90 град.

Источник света в осветителях - галогенная лампа накаливания с интерференционным отражателем КГИ 12 - 100.

Управление фокусировкой, изменение увеличения микроскопа и координатное перемещение осуществляется с помощью педали (МИКО-ОФ, МИКО-Н, МИКО-ЛОР) или манипулятора (МИКО-Н2, МИКО-ЛОР2).

По требованию Заказчика за дополнительную плату возможна поставка фотоадаптера, киноадаптера, микроскопа ассистента и педали управления (для МИКО-Н2, МИКО-ЛОР2).

Обращайтесь по адресу: 195009, С.-Петербург, а/я 27 НПК-2 АО ЛОМО
Тел.: (812) 248-25-08, (812) 248-29-35, Факс: (812) 542-24-29.
✓ (812) 248-25-60, (812) 248-59-09.