


# Lomo-Polam P-211/213

(Unterschied nur in der Beleuchtungs- und Tubusart)




Gesamtansicht des Gerätes. Die Stellknöpfe vorn im Fuß dienen der Spiegeleinstellung. Grob- und Feintrieb koaxial, Poltisch drehzentrierbar mit Teilung.

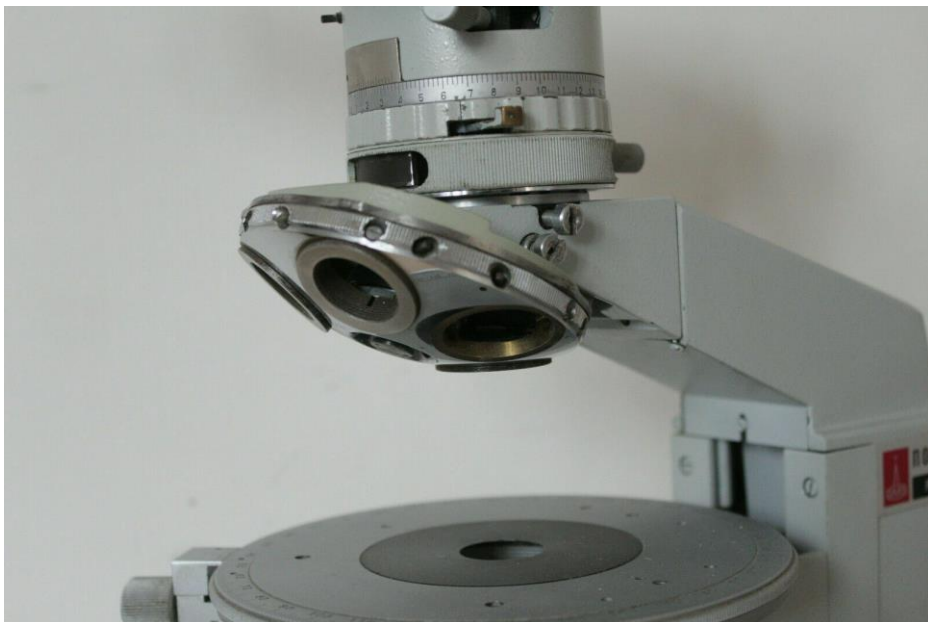

Revolver mit zentrierbaren M27 Fassungen, darüber die Einheit für Analysator und Filter.



Zwischenstück mit Analysator, zentrierbarer Blende und Öffnungen für Einschübe.

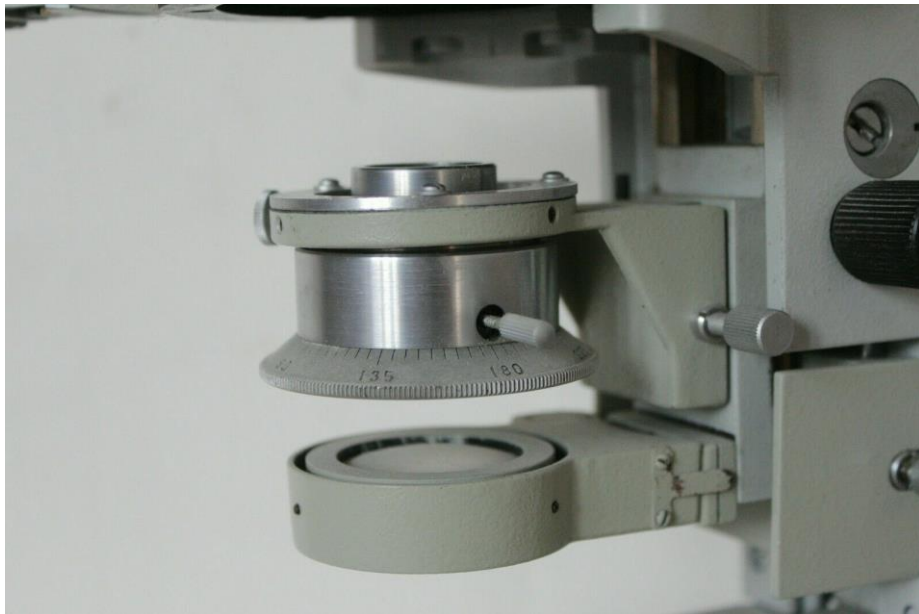

Kondensor mit Polarisator; drehbar mit Skala, sowie Klapplinse.  
(die obere Abbildung zeigt falsche Montage)





Die Beleuchtungseinheit. Ausführung mit Leuchtmittel 8V 15W Baj15d.  
Linker Hebel für Leuchtfeldblende, rechter Hebel für Fokus.



Die Okularaufnahme des Binotubus. Der Schlitz dient zur genauen Positionierung der Okulare (Spezialokulare, spannungsfrei mit Stift zur Ausrichtung)

